

Поздравляем Вас! Выбирая Waterpik - переносной водный ирригатор Вы находитесь на пути к улучшению здоровья ваших десен, и более здоровой улыбке! С клинически доказанной комбинацией водного давления и пульсаций, Waterpik - переносной водный ирригатор, удаляет вредные бактерии глубже между зубами и ниже линии десны – где, просто чистка, не приносит должного эффекта. Спасибо за то, что выбрали Waterpik - переносной водный ирригатор.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,**

использование электрических продуктов, особенно если у Вас есть дети, всегда соблюдайте правила приведенные ниже.  
**ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**

**ВНИМАНИЕ:**

Как уменьшить риск поражения от электрического тока:


- не обращайтесь с зарядным устройством влажными руками.
- не погружайте в воду или в другую жидкость.
- проверяйте шнур зарядного устройства, не допускаются повреждения.
- не используйте, купаясь.
- не помещайте или храните продукт, где он может упасть в ванную, душевую кабину или слив.
- не пытайтесь достать WaterPik, который упал в воду. **Отключите немедленно.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Для уменьшения риска получения ожогов, удара током, возгорания, серьезных ран или повреждения живой ткани:

- не используйте продукт, если имеются повреждения шнура или вилки. Свяжитесь с сервисным центром Waterpik.
- хорошо проинструктируйте и контролируйте Ваших детей и людей со специальными потребностями в правильной эксплуатации этого продукта.
- не направляйте воду под язык, в ухо, нос или другие тонкие области. Без соответствующих насадок, рекомендованных Waterpik, этот продукт способен к созданию давлений, которые могут вызвать серьезное повреждение в этих областях.
- используйте этот продукт только как обозначено в этих инструкциях или как рекомендовано Вашим зубным врачом - гигиенистом.
- используйте только те насадки, которые рекомендуются компанией Waterpik.
- заполняйте резервуар водой или другим зубным ополаскивателем, (то есть жидкость для полоскания рта или предписанные врачом гигиенистом). С соотношением 1:1, жидкости для полоскания рта, к воде.
- не бросайте! не вставляйте любые сторонние предметы в отверстия на продукте.
- храните зарядное устройство подальше от нагревательных приборов.
- не используйте вблизи распыляемых аэрозолей.
- не используйте жидкости для полоскания рта, которые содержат ИОД или Отбеливающие растворы.
- если Ваш врач советовал Вам пройти процедуру приема антибиотиков перед зубными процедурами, Вы должны проконсультироваться с Вашим дантистом перед использованием этого продукта.

**СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.**

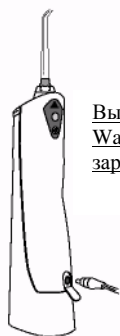


**Выключите WaterPik при зарядке !**


**Это важно!**

Перед первым использованием поставьте Waterpik на подзарядку в течение 16 часов. Включите шнур в любую стандартную электрическую розетку. Waterpik - переносной водный ирригатор останется заряженным в течение приблизительно 1 недели в зависимости от использования.

Подготовка к работе. Приставьте резервуар к моторной части и нажмите вниз до щелчка.

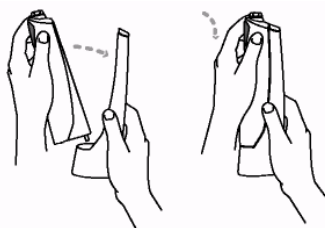


Откройте верхний заливной лючок и наполните резервуар водой.

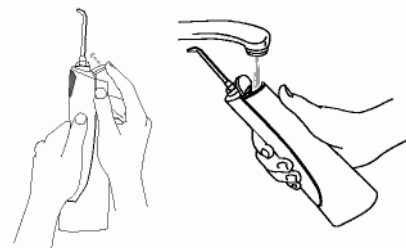




Вставка и удаление насадки происходит при нажатии на верхнюю кнопку в виде треугольника. Цветное кольцо плотно станет сверху, если наконечник будет правильно вставлен на свое место.


Наклонитесь над раковиной. Нацельте наконечник к зубам, и включите WaterPik.

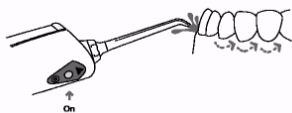




Направьте поток, поворачивая кнопку наверху ручки.

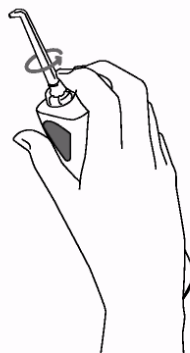


Держите единицу вертикально в течение использования для лучших результатов.

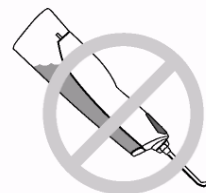


Рекомендованная Техника: Прямая реактивная струя под углом 90 градусов к вашей линии десен. Прикрывая губы, чтобы избежать распыливания, но позволяя воде, свободно течь от рта в слив. Для достижения лучших результатов, начните в области коренного зуба (задние зубы), и продвигайтесь к передним зубам. Ведите наконечник по линии десен. Продолжайте, пока все области вокруг и между зубами не будут очищены.

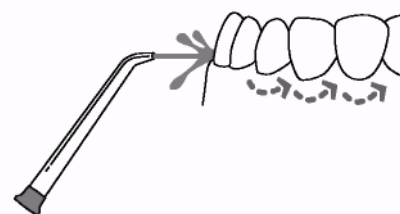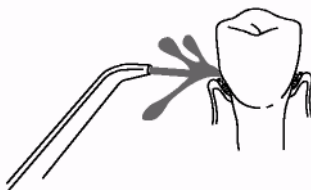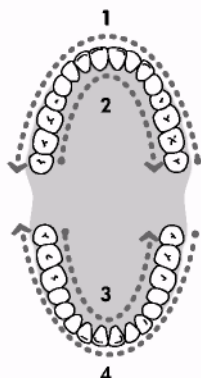

Когда закончите, выключите WaterPik. Освободите от жидкости, резервуар.

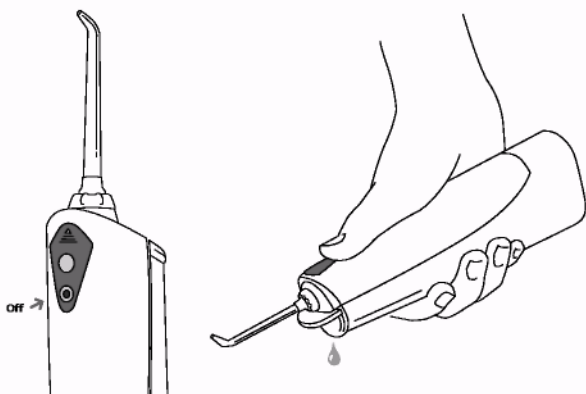

Если хотите отсоединить резервуар от моторного отсека, надавите резервуар вниз и отведите от моторного отсека.

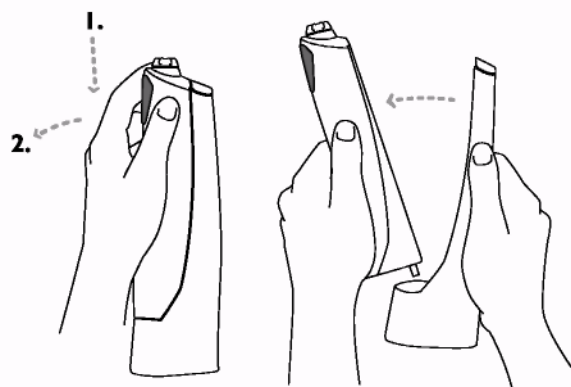

Вы можете использовать с Вашим WaterPik жидкость для полоскания рта. Отметьте: использование некоторых антибактериальных ополаскивателей может сократить срок использования Вашего WaterPik.

Если у Вас есть вопросы об использовании специфических ополаскивателей в Вашем WaterPik, свяжитесь с компанией по обслуживанию WaterPik. После использования любого специального ополаскивателя в резервуаре, промойте в течение одной минуты проточной водой. Частично заполните резервуар теплой водой из-под крана. Направьте наконечник в слив. Включите WaterPik и позвольте ему поработать до полного опустошения. Это поможет препятствовать засорению наконечника и продлит срок службы прибора.

Никогда не опускайте прибор в воду. Вытрите прибор мягкой тканью и слабоактивным неабразивным моющим средством. Резервуар может быть вымыт с мыльной водой или в посудомоечной машине. Перед очисткой, отключите прибор от зарядного устройства. Ремонт этого прибора должен быть выполнен только сервисным центром обслуживания WaterPik.